

NEUHEITEN 2025



Schmerzlinderung bei Überlastung

BORT SellaTex® Plus - Quervain

Handgelenkorthese zur Immobilisierung
und Stabilisierung bei Tendovaginitis
de Quervain



Mit medialer Fensterung

Med

BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

Sport

BORT MyoActive Sport Wadenstütze und
Asymmetric® Sport Kniebandage
mit Haftband

BORT Generation Rückenorthese

Bessere Entlordosierung durch
verlängerte Rückenplatte

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®



NEU

BORT SellaTex® Plus – Quervain

Handgelenkorthese mit medialer Fensterung zur Immobilisierung und Stabilisierung



REF 112160 | Pos.Nr. 22.07.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur Stabilisierung des Daumengrund-, Daumensattel- und Daumenendgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Komplette Öffnung
- Länge: ca. 20 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Grosses Fenster zur Entlastung des problematischen Bereichs bei Tendovaginitis de Quervain
- Einfache, therapiegemässe Abrüstmöglichkeit des Daumenelements
- Langes Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl



Abrüsbare Daumenschiene zur einfachen Anpassung im Therapieverlauf

INDIKATIONEN

Tendovaginitis de Quervain, präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Rhizarthrose, CTS

Grössen	Umfang Handgelenk
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

Spezielle Handgelenkorthese für die konservative Therapie der Tendovaginitis de Quervain

ÜBERLASTUNG & SCHMERZ

Die Sehnenscheidenentzündung im Bereich des daumenseitigen Handgelenks ist ein chronisches Überlastungssymptom und wird vor allem durch häufige Abduktion (Bewegung des Daumens von der Handfläche weg) verursacht.



RUHIGSTELLUNG & LINDERUNG

Bei der konservativen Therapie stehen die Verhinderung von Überlastung und die Ruhigstellung des Gelenkbereichs im Mittelpunkt. Die **BORT SellaTex® Plus – Quervain** Handgelenkorthese hat eine stabilisierende Wirkung und immobilisiert das Daumengelenk. Sie kann dadurch schmerzauslösende Bewegungen verhindern.



NEU

BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

Zur zuverlässigen Ruhigstellung



REF 112790 | Pos.Nr. 22.06.04.00.1


PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Klettverschlüsse, variabel positionierbar
- Komplette zu öffnen

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Modulares Orthesen-System:

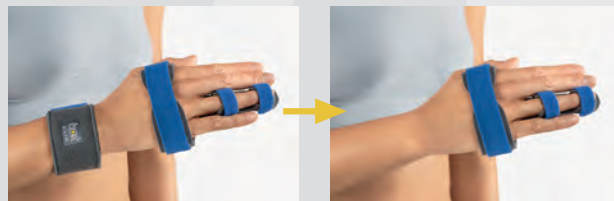

Handgelenkstabilisierung, abrüstbar

Grössen Umfang Mittelhand



Grösse 1	17 – 19 cm
Grösse 2	19 – 22 cm
Grösse 3	22 – 26 cm

rechts und links gleich

Med

NEUES DESIGN

BORT Generation® Rückenorthese

Besonders einfach an- und abzulegen



REF 215800 | Pos.Nr. 23.10.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Zur Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung
- Unelastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Höhen Rückenplatte: 27 cm oder 31 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Beckenkorb, tailliert einstellbar
- Innovative, leichte Orthesenkonstruktion
- Breite Griffflaschen zur einfachen Handhabung
- Kraftsparendes Seilzugsystem
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

Grössen Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

Höhe 27 cm oder 31 cm angeben



Generation



Produktmodifikationen

Farbumstellungen



BORT MalleoStabil®-Orthesen

REF 100500 / 100520 / 100540 |
Pos.Nr. 22.02.01.00.1

- Neue Farbe: ■ grau



BORT StabiloGen® Eco mit Haftband kurz

REF 114520HK | Pos.Nr. 05.04.13.00.1

- Neue Farbe: ■ schwarz

Designumstellungen



BORT StabiloPro® Knieorthese

REF 182150 | Pos.Nr. 22.04.02.00.1

- Mit neuem Polkuvngelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT StabiloPro® Knieorthese offene Form

REF 182300 | Pos.Nr. 22.04.02.00.1

- Mit neuem Polkuvngelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT Generation Knieorthese

REF 215400 | Pos.Nr. 22.04.02.00.1

- Mit neuem Polkuvngelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage

REF 114510 | Pos.Nr. 05.04.13.00.1

- Jetzt auch in den Größen 6 und 6+ erhältlich



BORT CoxaPro Hüftorthese

REF 201400 | Pos.Nr. 23.06.01.00.1

- Neu mit Angabe der jeweiligen f-Masse



BORT TaloFX® Sprunggelenkorthese

REF 054800 | Pos.Nr. 22.02.04.00.1

- Neuer Schnitt
- Neues Klettverschluss-System
- Kompletz zu öffnen für einfaches Anlegen



BORT Ellenbogen-ROM-Orthese

REF 055500 | Pos.Nr. 22.08.05.00.1

- Neues optimiertes Ellenbogengelenk zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radioulnargelenks

NEU

BORT MyoActive Sport Wadenstütze

Aktivbandage bei Muskelfaserriss und Muskelzerrungen



[REF] 116500SP | Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbereich
- Längen: 24 cm (small), 25 cm (medium), 26 cm (large; x-large)

FARBE: ☐ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung
- Modernes Sport-Design
- Latexfreies Gestrick

Sport

Grössen	Wadenumfang
 small	bis 33 cm
medium	33 – 38 cm
large	38 – 43 cm
x-large	43 – 47 cm

rechts und links gleich

NEU

BORT Asymmetric® Sport Kniebandage mit Haftband

Zur Korrektur des Patellagleitweges, auch in Plus- und Doppel-Plus Grössen erhältlich



[REF] 114700SPH | Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- SOFTflex-3D-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ☐ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- Latexfreies Gestrick
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)
- Bandagenlänge in Grösse 3: 35 cm

Grössen	d-Mass	f-Mass
 Grösse 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
Grösse 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
Grösse 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
Grösse 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
Grösse 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
Grösse 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
Grösse 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
Grösse 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
Grösse 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
Grösse 5++	41 – 45 cm	60 – 64 cm
Grösse 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
Grösse 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
Grösse 6++	45 – 49 cm	68 – 72 cm
Grösse 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
Grösse 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm

rechts oder links angeben

Sport



COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company.

NEUES DESIGN

BORT X-Walker

Das Orthesenprogramm zur Versorgung von Fuss- und Sprunggelenksverletzungen



BORT X-Walker lang

REF 101300

Pos.Nr. 22.03.03.00.1



BORT X-Walker kurz

REF 101350


Pos.Nr. 22.03.03.00.1



BORT X-Walker Achillo


REF 101320

Pos.Nr. 22.03.04.00.1

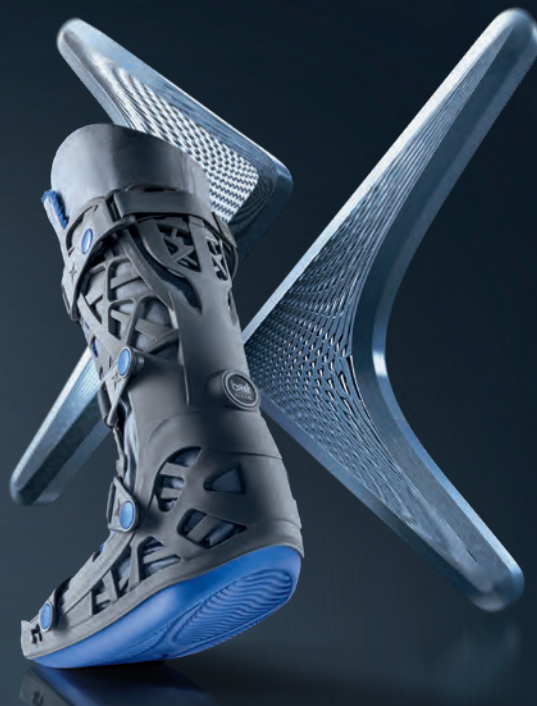

Grossflächiges Vakuum-System

zur formschlüssigen Bettung und Stabilisierung. Das in den Polsterliner integrierte, mit Granulat gefüllte Vakuumkissen lässt sich durch die mitgelieferte Vakuumpumpe formschlüssig an die Fuss- bzw. Unterschenkelanatomie anpassen. Druckstellen können durch die gleichmässige und individuell anpassbare Bettung vermieden werden.

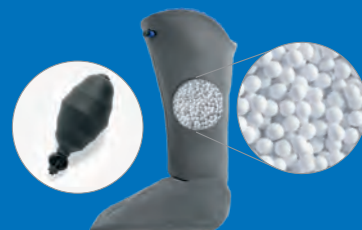

Ersatzteile für BORT X-Walker



Liner-Set
(Linerbezug, Vakuumkissen und Pumpe)



Linerbezug



Vakuumpumpe



Set
Fersenkeile



Vakuumkissen

+ Zubehör für alle BORT X-Walker

REF 100370

BORT
Unterziehstrumpf



REF 100380

BORT
Nässeschutzhülle



REF 100390

BORT Schutzhülle
für die Nacht



Med

+ Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 031 822 05 45

BORT Lösungen erfüllen individuelle Anforderungen und Wünsche. Unsere Orthosan Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Aussendienst beraten Sie hierzu umfassend und kompetent. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand Januar 2025.



Online-Shop

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Orthosan AG | Freiburgstrasse 632 | 3172 Niederwangen b. Bern
Telefon 031 822 05 45 | www.orthosan.ch | info@orthosan.ch